

MASÁŽNÍ PŘÍSTROJ S IČ OHŘEVEM

model: WP-A809C
Návod k použití

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru, kterou jste nám projevili nákupem tohoto výrobku. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Před prvním použitím si přečtěte tento návod.

Všeobecné bezpečnostní pokyny


1. Před zprovozněním tohoto přístroje si pečlivě přečtěte tento návod.
2. Tento přístroj je vhodný pouze pro nekomerční, domácí použití.
3. Pokud přístroj nepoužíváte, při výměně příslušenství a při čištění vždy přístroj vypojte ze zásuvky.
4. Přístroj udržujte mimo dosah dětí, zabráníte tak vzniku zranění. Ujistěte se, že přívodní kabel není poškozený.
5. Přístroj i přívodní kabel pravidelně kontrolujte, zda nedošlo k jeho poškození. Pokud došlo k poškození přístroje či kabelu, přístroj nepoužívejte.
6. Přístroj se nepokoušejte sami opravit, obraťte se na autorizované servisní středisko.
7. Přístroj a přívodní kabel držte mimo dosah zdrojů tepla, přímého slunečního svitu, vlhkosti a vyvarujte se dotyku s ostrými hranami.
8. Pokud přístroj nepoužíváte, vypněte ho. To platí i v případě pouze krátkého užívání.
9. Používejte pouze originální příslušenství.
10. Nepoužívejte v exteriéru.
11. Přístroj nesmí přijít do kontaktu s vodou a vlhkostí. Nedotýkejte se přístroje s mokřýma rukama.
12. Pokud přijde přístroj do kontaktu s vodou, okamžitě jej vypojte ze zásuvky.
13. Přístroj používejte pouze k účelům, ke kterým byl vyroben.

Ostatní bezpečnostní pokyny

1. Přístroj nepoužívejte v úrovni očí a v blízkosti jiných citlivých částí těla.
2. Přístroj nepoužívejte pod pokrývkou ani na jiném špatně větraném místě.
3. Přístroj nepožívejte na podrážděnou nebo poraněnou pokožku, v případě pochyb jeho použití konzultujte s lékařem.

Přehled částí

1. přepínač funkcí
2. masážní hlavice s infra světlem
3. nástavec kartáčový – pro intenzivní masáž se stimulujícím účinkem
4. nástavec s velkými hrbolky – pro hlubokou masáž po fyzické námaze
5. nástavec s malými hrbolky - intenzivní masáž k uvolnění napětí a bolesti svalů
6. plochý nástavec – na jemnou masáž obličeje

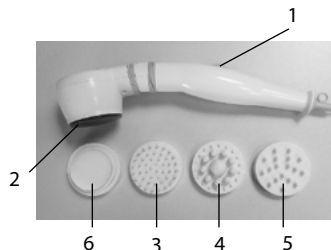

Použití

1. Zapojte zástrčku do zásuvky.
2. Přepínač funkcí nastavte do požadované polohy, případně nasadte nástavec
2. Přístroj používejte pouze po dobu 20 minut. Poté nechte přístroj po dobu 20 minut vychladnout.

Přepínač funkcí

0. vypnuto
1. masáž
2. infra světlo
3. masáž s infra světlem

Přepínačem nastavte režim. Před použitím infra světla vyzkoušejte teplotu hlavičky.

Příslušenství (masážní nástavec):

V případě potřeby nasadte příslušenství (požadovaný masážní nástavec) na hlavičku.

- nástavec kartáčový – pro intenzivní masáž se stimulačním účinkem
- nástavec s velkými hrbolky – pro hlubokou masáž po fyzické námaze
- nástavec s malými hrbolky - intenzivní masáž k uvolnění napětí a bolesti svalů
- plochý nástavec – na jemnou masáž obličeje



Čištění

Před čištěním vždy vypojte ze zásuvky. Tělo přístroje očistěte mírně navlhčeným hadrem a poté vytřete do sucha. Nepoužívejte žádné chemické a abrasivní čisticí prostředky.

Technické údaje:

Příkon: 13W

Napětí: 220-240V (50/60Hz)

Ochrana životního prostředí

Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení.

Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Baterie nevhazujte do běžného odpadu, ale odevzdejte na místa zajišťující recyklaci baterií.

Servis

V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v příloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje

- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho používání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení...)
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů, nevhodného příslušenství či nevhodných nástrojů apod.

Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby. Vyobrazení a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel.