

Krokový kloubová chodítka pro seniory

CZ

NÁVOD K POUŽITÍ

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevili nákupem tohoto výrobku. Důkladně si přečtěte tyto pokyny k použití a uchovejte je pro další použití.

Popis:



VÁHOVÉ ZATÍŽENÍ: max 100 kg


1. Pojistka skládacího mechanismu.
2. Zajišťovací západky (vložené do odkládacích otvorů).
3. Vymezení délky kroku.
4. Zajišťovací otvory pro fixaci.
5. Kolečka (místo koleček je možné nasadit gumové koncovky které jsou součástí balení).

Použití chodítka

Chodítka je možno použít jako krokový, kdy se obě strany pohybují nezávisle na sobě, což umožňuje pohybovat se bez nutnosti zvedání celého chodítka.

Pokud chcete použít chodítka jako krokový, ponechte zajišťovací západky v odkládacích

otvorech a pouze jej rozložte. Pokud chcete chodítka použít jako pevné, vložte obě zajišťovací západky do zajišťovacích otvorů. Před každým použitím se vždy ujistěte, že veškeré pojistné prvky jsou správně zabezpečeny. Pro složení chodítka nejprve odjistěte obě západky (vložte je do odkládacích otvorů) a stiskněte pojistku skládacího mechanismu. Nyní můžete chodítka složit do přepravní velikosti.

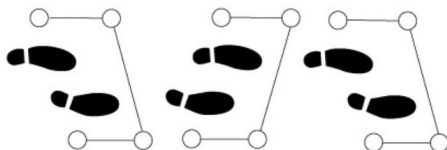

Přesun z vozíku na chodítko

Ujistěte se, že chodítko je stabilní. Opřením rukou do madel vozíku si stoupněte a postupně a opatrně, jednu ruku po druhé, se přesuňte na chodítko.



Chůze s chodítkem

1. Umístěte střed svého chodidla mezi zadní nohy chodítka.
2. Zvedněte chodítko a pohodlně ho posuňte trochu dál od sebe. Ujistěte se, že je nyní pevně opřeno o zem.
3. Opatrně, krok za krokem, dojděte blíž k chodítku.



1.




2.



3.

Přesun z vozíku na chodítko - (pokud máte poraněnou pravou dolní končetinu)

Ujistěte se, že chodítko je stabilní. Opřením rukou do madel vozíku si stoupněte a postupně a opatrně nejprve přesuňte levou a pak pravou ruku na chodítko. (Pokud máte poraněnou levou nohu či chodidlo, přesuňte jako první pravou a poté levou ruku).

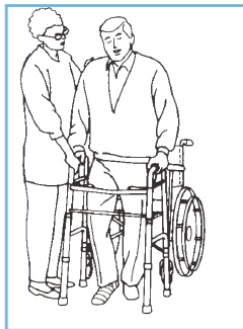

Individuální nastavení chodítka

Při ruce natažené dolů by se madlo chodítka mělo nacházet ve výšce zápěstí. Pokud položíte ruku na madlo, měli byste mít loket ohnutý do úhlu zhruba 20° - 30°. Optimální výšku chodítka nastavte na jednu z osmi poloh. Všechny 4 nohy nastavte na shodnou pozici a zkontrolujte jejich zajištění (všechny západky musí zacvaknout).


Upozornění:

Dávejte pozor na následující překážky:

1. Prodlužovací šňůry
2. Tekutiny na podlaze
3. Běhouny
4. Hračky či nepořádek
5. Nábytek
6. Dveře a prahy
7. Mezery v podlaze

Varování:

1. Netlačte dopředu jen jednu stranu chodítka, aniž byste ho předtím zvedli.
2. Používejte pouze originální příslušenství.
3. Použitím jiného příslušenství se vystavujete riziku pádu a zranění.
4. Chodítko nepoužívejte na schodech či eskalátorech.
5. Chodítko nepřetěžujte (váhové zatížení max. 100 kg).

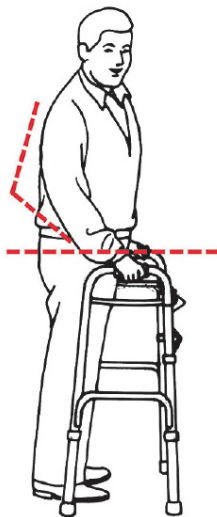

ZÁRUKA

Tato záruka se nevztahuje na závadu, která je důsledkem špatného zacházení, nedbalosti či běžného opotřebení výrobku. Záruka se také nevztahuje na součástky, které z povahy materiálu podléhají opotřebení a vyžadují pravidelnou výměnu, např. gumové součástky, úchyty, kolečka a jejich ukotvení a díly.

Ochrana životního prostředí

Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Servis

V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v příloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Pokud máte otázky ohledně Vašeho výrobku či záruky, kontaktujte prosím naše servisní oddělení.

Kontakt najdete na www.tvproducts.cz

Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby. Vyobrazení a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

Kedves vásárló, köszönjük a bizalmat, amit ezzel a termékkel mutatott. Olvasd el alaposan ezeket az utasításokat, és tartsd meg őket a jövőbeni használatra.

Leírás: FlexStep 1 modell



SÚLYTERHELÉS: maximum 100 kg

1. Összecsukható mechanizmus zár.
2. Zárzárak (tárolónyílásokba helyezve).
3. A lépés hosszának meghatározása.


4. Lyukak bezárása a fixációhoz.
5. Kerekek (kerekek helyett gumivégeket lehet feltenni, amelyek a csomagban vannak).

Járókeret használata

A járkáló lépcsősítőként is használható, ahol mindkét oldal függetlenül mozog egymástól, így anélkül, hogy az egész járókeretet kellene emelni.


Ha járóeszközt akarsz léptetőként használni,

Hagyd a zárózárat a tárolónyílásokban, és csak nyitd ki. Ha a járókeretet fix eszközként akarsz használni, tedd be mindkét zárat a zárólyukakba. Mindig ügyelj rá, hogy minden biztonsági funkció megfelelően van rögzítve minden használat előtt. A járóeszköz összehajtásához először nyitd ki mindkét zárat (tedd be a tárolónyílásokba), és nyomd meg a hajtogató mechanizmus zárját. Most már a járókeretet is összehajthatod egy szállító méretre.

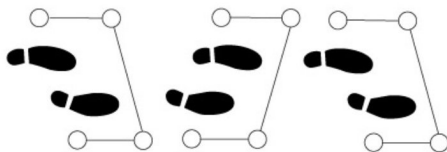

Átlépés kerekesszékről járókeresivá

Győződj meg róla, hogy a járóeszköz stabil legyen. Támaszd a kezedet a kocsfi fogantyúin, állj fel, és fokozatosan a óvatosan, kézről kézre lépj a járókerhez.

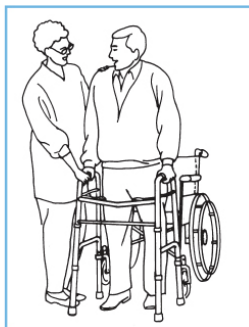

Járásezközzel sétá

1. Helyezd a lábád közepét a járóeszköz hátsó lábai közé.
2. Emeld fel a járókeretet, és kényelmesen mozgasd el egy kicsit távolabb egymástól.
Győződj meg róla, hogy most szilárdan a földön pihen.
3. Óvatosan, lépésről lépésre közelebb lépj a járóhoz.



1.




2. 3.



Átállás kerekesszékről járóeszközre – (ha sérült a jobb alsó végtagod)

Győződj meg róla, hogy a járóeszköz stabil legyen. Támaszd a kezedet a kocsfi fogantyúin, állj fel, és fokozatosan És óvatosan mozgasd először a bal kezed, majd a jobb kezedet a járókerhez. (Ha sérült a bal lábád vagy lábfejed, először a jobb kezed, majd a bal kezedet mozgasd).

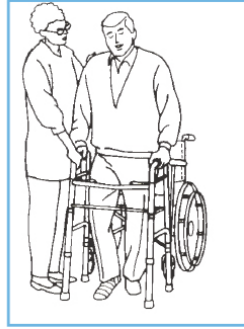


Egyéni járkálóbeállítások

Ha a kezet lefelé nyújtják, a járókerék nyelének csuklómagasságban kell lennie. Ha a kezed a nyélre kerül, a könyöködet kb. 20°-30° szögben kell hajlítani. Állítsd be a járógép optimális magasságát a nyolc pozíció egyikére. Állítsd be mind a négy lábat ugyanarra a pozícióra, és ellenőrizd a záródást (minden zárnak kattannia kell).

Figyelem:

Figyelj a következő akadályokra:

1. Hosszabbító kábelek
2. Folyadékok a padlón
3. Futók
4. Játékok vagy rendetlenség
5. Bútor
6. Ajtók és küszöbértékek
7. Rések a padlón

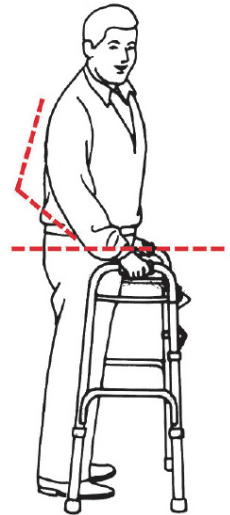

Figyelem:

1. Ne nyomd előre csak a járóeszköz egyik oldalát anélkül, hogy előbb felemelnéd.
2. Csak eredeti kiegészítőket használjunk.
3. Más kiegészítők használata kitéve a esés és sérülés kockázatának.
4. Ne használd a járóeszközt lépcsőn vagy mozgólépcsőn.
5. Ne terhelje túl a járógépet (teherbírás max. 100 kg).

GARANCIA

Ez a garancia nem fedezi a termék rossz kezeléséből, gondatlanságból vagy normál kopásból eredő hibát. A garancia nem vonatkozik azokra az alkatrészekre sem, amelyek az anyag természete miatt kopásnak vannak kitéve, és rendszeres cserét igényelnek, például gumialkatrészeket, tartókat, kerekeket, rögzítőket és alkatrészeket.

Környezetvédelem

A termék élettartama lejártá után vagy olyan időszakban ne dobd el a terméket háztartási hulladékkal együtt, amikor a javítás gazdaságtalan lenne. A termék megfelelő eltüntetése érdekében adja át a kijelölt gyűjtőpontoknak, ahol ingyenesen elfogadják. Ha helyesen eltünteti őket, segítene megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív hatásokat, amelyek a hulladék helytelen ártalmásának következményei lehetnek. További részletekért kérjük, vegye fel a kapcsolatot helyi hatósággal vagy a legközelebbi gyűjtőponttal. Büntetések szabhatók ki, ha ezt a hulladéktípust helytelenül kezelik, a nemzeti szabályozásoknak megfelelően.

Szolgálat

Ha a termék vásárlása után bármilyen hibát talál, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a szerviz osztállyal. A termék használatakor kövesse a mellékelt használati útmutatóban megadott utasításokat. A panaszokat nem veszik figyelembe, ha módosítottad a terméket, vagy nem követted a használati utasításokat.

Ha bármilyen kérdése van termékével vagy garanciájával kapcsolatban, kérjük, vegye fel a kapcsolatot szervizosztályunkkal kapcsolatban.

A kapcsolattartót a www.tvproducts.cz oldalon találod meg

A beszállító fenntartja a jogot, hogy módosítsa a használati utasításokat, és nem felelős az esetleges nyomtatási hibákért. Az illusztráció és leírás modelltől függően eltérhet a valóságtól.

INSTRUKCJE UŻYCIA

Drogi kliencie, dziękujemy za zaufanie, jakim się okazałeś, kupując ten produkt. Dokładnie przeczytaj te instrukcje i zachowaj je na przyszłość.

Opis: Model FlexStep 1



OBCIĄŻENIE: maksymalnie 100 kg


1. Zamek mechanizmu składania.
2. Zamki zamykające (wstawiane do otworów magazynowych).
3. Określenie długości kroku.
4. Zamykanie otworów do stabilizacji.
5. Koła (zamiast kół, można założyć gumowe końcówki, które są dołączone do pakietu).

Używanie chodzika

Chodzik może być używany jako chodzik po schodkach, gdzie obie strony poruszają się niezależnie od siebie, co pozwala poruszać się bez konieczności podnoszenia całego chodzika.


Jeśli chcesz używać chodzika jako chodzącego chodzika,

Zostaw zatrzaski zamykające w otworach do przechowywania i po prostu rozłóż zatrzaski. Jeśli chcesz używać chodzika jako stałego, włóż oba zatrzaski do otworów blokujących. Zawsze upewnij się, że wszystkie zabezpieczenia są odpowiednio zabezpieczone przed każdym użyciem. Aby złożyć chodzik, najpierw odblokuj oba zatrzaski (włóż je do otworów na schowek) i naciśnij zamek mechanizmu składania. Teraz możesz złożyć chodzik do rozmiaru transportowego.

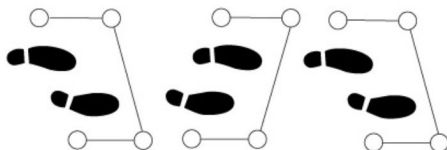

Przejście z wózka inwalidzkiego na chodzik

Upewnij się, że chodzik jest stabilny. Połóż ręce na uchwytach wózka, wstań i stopniowo a ostrożnie, ręka po ręce, przesuвай się do chodzika.

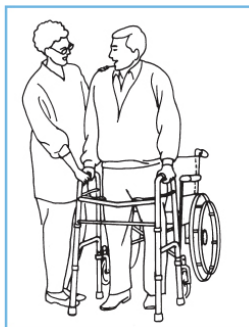

Chodzenie z chodzikiem

1. Umieść środek stopy między tylnymi nogami chodzika.
2. Podnieś chodzik i wygodnie odsuń go nieco dalej. Upewnij się, że teraz jest mocno na ziemi.
3. Ostrożnie, krok po kroku, podejdz bliżej osoby chodzącej.



1.




2. 3.



Przejście z wózka inwalidzkiego na chodzik – (jeśli masz kontuzję prawej kończyny dolnej)

Upewnij się, że chodzik jest stabilny. Połóż ręce na uchwytach wózka, wstań i stopniowo i ostrożnie przesuń najpierw lewą ręką, a potem prawą ręką do chodzika. (Jeśli masz kontuzję lewej nogi lub stopy, najpierw porusz prawą ręką, a potem lewą).

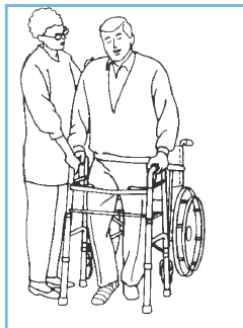


Ustawienia indywidualnych chodników

Z ręką wyciągniętą w dół, uchwyt chodnika powinien być na wysokości nadgarstka. Jeśli położysz rękę na rękojeści, łokieć powinien być zgięty pod kątem około 20° - 30° . Ustaw optymalną wysokość chodnika na jedną z ośmiu pozycji. Ustaw wszystkie 4 nogi do tej samej pozycji i sprawdź ich blokadę (wszystkie zatrzaski muszą się zatrzepać).

Uwaga:

Uważaj na następujące przeszkody:

1. Przedłużacze
2. Płyty na podłodze
3. Biegacze
4. Zabawki lub bałagan
5. Meble
6. Drzwi i progi
7. Szczeliny w podłodze

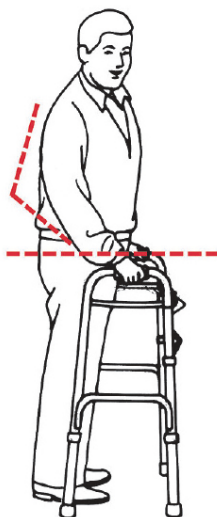

Uwaga:

1. Nie pchaj tylko jednej strony chodnika do przodu, nie podnosząc go wcześniej.
2. Używaj wyłącznie oryginalnych akcesoriów.
3. Używanie innych akcesoriów naraża Cię na ryzyko upadku i kontuzji.
4. Nie używaj chodnika na schodach ani ruchomych schodach.
5. Nie przeciążaj chodnika (maksymalna waga 100 kg).

GWARANCJA

Ta gwarancja nie obejmuje wad wynikających z niewłaściwego obchodzenia, zaniedbania lub normalnego zużycia produktu. Gwarancja nie obejmuje również komponentów, które są podatne na zużycie ze względu na charakter materiału i wymagają regularnej wymiany, np. gumowych części, mocowań, kół oraz ich kotwic i części.

Ochrona środowiska

Nie utylizuj produktu z odpadami domowymi po upływie jego żywotności lub w czasie, gdy naprawa byłaby nieopłacalna. Aby właściwie utylizować produkt, należy przekazać go do wyznaczonych punktów zbioru, gdzie zostanie przyjęty bezpłatnie. Prawidłowa utylizacja pomoże Ci chronić cenne zasoby naturalne oraz zapobiegnie potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzi, które mogą być skutkiem niewłaściwego utylizowania odpadów. Aby uzyskać więcej szczegółów, prosimy o kontakt z lokalnym urzędem lub najbliższym punktem zbiórki. Mogą zostać nałożone kary, jeśli tego typu odpady zostaną niewłaściwie utylizowane, zgodnie z krajowymi przepisami.

Służba

Jeśli po zakupie produktu znajdziesz jakąkolwiek wadę, skontaktuj się z działem serwisowym. Podczas korzystania z produktu należy stosować się do instrukcji zawartych w dołączonej instrukcji obsługi. Skargi nie będą brane pod uwagę, jeśli zmodyfikowałeś produkt lub nie przestrzegałeś instrukcji dotyczących użytkowania.

Jeśli masz jakiegokolwiek pytania dotyczące swojego produktu lub gwarancji, skontaktuj się z naszym działem serwisowym.

Kontakt można znaleźć pod www.tvproducts.cz

Dostawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania wszelkich zmian w instrukcjach dotyczących użytkowania i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy drukarskie. Ilustracja i opis mogą różnić się od rzeczywistości w zależności od modelu.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Dragă client, vă mulțumesc pentru încrederea pe care ați arătat-o achiziționând acest produs. Citește cu atenție aceste instrucțiuni pentru utilizare și păstrează-le pentru referințe viitoare.

Descriere: Modelul FlexStep 1



GREUTATE ÎNCĂRCATĂ: maxim 100 kg


1. Încuietoare a mecanismului pliabil.
2. Încuietori de blocare (introduși în găuri de depozitare).
3. Definierea lungimii pasului.
4. Blocarea găurilor pentru fixare.
5. Roți (în loc de roți, se pot monta capete de cauciuc, care sunt incluse în pachet).

Folosirea unui cadru de mers

Mersul poate fi folosit ca un mersător cu trepte, unde ambele părți se mișcă independent una de cealaltă, ceea ce îți permite să te miști fără să ridici întregul mersător.

Dacă vrei să folosești un cadru de mers ca pas,

Lasă zăvorele de blocare în găurile de depozitare și doar deschide-le. Dacă vrei să folosești mersulețul ca unul fix, introdu ambele încuietori de blocare în găurile de blocare. Asigură-te întotdeauna că toate caracteristicile de siguranță sunt bine fixate înainte de fiecare utilizare. Pentru a plia mersul, deblochează mai întâi ambele încuietori (introduce-le în găurile de depozitare) și apasă încuietoarea mecanismului pliabil. Acum poți plia mersul la dimensiunea unui transport.

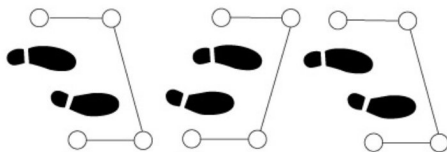

Trecerea de la un scaun cu roțile la un cadru de mers

Asigură-te că mersul este stabil. Sprijină-ți mâinile pe mânerurile căruciorului, ridică-te și încet a cu grijă, mână cu mână, mută-te la mers.



Mergând cu un cadru de mers

1. Plasează centrul piciorului între picioarele din spate ale mersului.
2. Ridică cadru și mută-l confortabil puțin mai departe. Asigură-te că acum stă bine pe pământ.
3. Cu grijă, pas cu pas, apropie-te de cadru de mers.



1.




2. 3.



Trecerea de la un scaun cu roțile la un cadru de mers - (dacă ai un membru inferior drept accidentat)

Asigură-te că mersul este stabil. Sprijină-ți mâinile pe mânerurile căruciorului, ridică-te și încet și mută cu grijă mâna stângă și apoi mâna dreaptă mai întâi pe cadru de mers. (Dacă ai un picior sau piciorul stâng accidentat, mișcă mai întâi mâna dreaptă, apoi stânga).

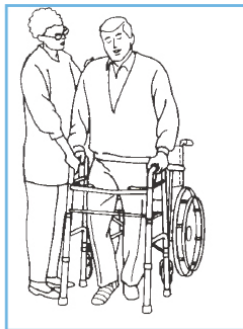


Setări individuale ale mersului

Cu mâna întinsă în jos, mânerul mersului ar trebui să fie la înălțimea încheieturii. Dacă îți pui mâna pe mâner, cotul ar trebui să fie îndoit la un unghi de aproximativ 20° - 30° . Setează înălțimea optimă a mersului la una dintre cele opt poziții. Ajustează toate cele 4 picioare în aceeași poziție și verifică blocarea (toate zăvorele trebuie să facă clic).

Atenție:

Fii atent la următoarele obstacole:

1. Prelungitoare
2. Lichide pe podea
3. Alergători
4. Jucării sau dezordine
5. Mobilier
6. Uși și praguri
7. Goluri în podea

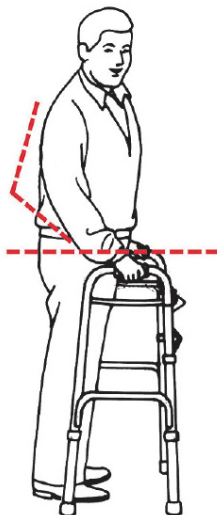

Atenție:

1. Nu împingeți înainte doar o parte a mersului fără a-l ridica mai întâi.
2. Folosește doar accesoriile originale.
3. Folosirea altor accesorii te expune riscului de cădere și accidentare.
4. Nu folosiți cadru pe scări sau scări rulante.
5. Nu supraîncărcați mersul (greutate maximă: 100 kg).

GARANȚIE

Această garanție nu acoperă un defect rezultat din manipularea necorespunzătoare, neglijență sau uzura normală a produsului. Garanția nu acoperă nici componentele supuse uzurii din cauza naturii materialului și care necesită înlocuire regulată, de exemplu piesele din cauciuc, suporturile, roțile și ancorajele și piesele lor.

Protecția mediului

Nu aruncați produsul împreună cu deșeurile casnice după expirarea duratei de viață a produsului sau într-un moment în care reparația ar fi nerentabilă. Pentru a elimina corect produsul, predați-l punctelor de colectare desemnate, unde va fi acceptat gratuit. Prin eliminarea corectă a acestora, vei ajuta la conservarea resurselor naturale valoroase și la prevenirea potențialelor efecte negative asupra mediului și sănătății umane, care ar putea fi consecințele eliminării necorespunzătoare a deșeurilor. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să contactați autoritatea locală sau cel mai apropiat punct de colectare. Se pot impune sancțiuni dacă acest tip de deșeuri este eliminat incorect, în conformitate cu reglementările naționale.

Serviciu

În cazul în care găsiți vreun defect după achiziționarea produsului, vă rugăm să contactați departamentul de service. Când folosești produsul, urmează instrucțiunile din manualul de instrucțiuni atașat. Reclamațiile nu vor fi luate în considerare dacă ați modificat produsul sau nu ați urmat instrucțiunile din instrucțiunile de utilizare.

Dacă aveți întrebări legate de produsul sau garanția dumneavoastră, vă rugăm să contactați departamentul nostru de service.

Puteți găsi contactul la www.tvproducts.cz

Furnizorul își rezervă dreptul de a face orice modificări ale instrucțiunilor de utilizare și nu este răspunzător pentru posibile erori de tipărire. Ilustrația și descrierea pot diferi de realitate în funcție de model.

Kíbové chodidlá s krokmi pre seniorov

SK

NÁVOD NA POUŽITIE

Vážený zákazník, ďakujem za dôveru, ktorú ste prejavili kúpou tohto produktu.

Dôkladne si prečítajte tieto pokyny na použitie a uchovajte si ich pre budúce použitie.

Popis: Model FlexStep 1



HMOTNOSŤ: MAXIMÁLNE 100 kg


1. Zámok skladacieho mechanizmu.
2. Zamykacie západky (vložené do úložných otvorov).
3. Definovanie dĺžky kroku.
4. Zamykanie dier na fixáciu.
5. Kolesá (namiesto kolies je možné nasadiť gumové konce, ktoré sú súčasťou balíka).

Použitie chodítka

Chodítko sa dá použiť ako chodítko na kroku, kde sa obe strany pohybujú nezávisle od seba, čo vám umožňuje pohybovať sa bez toho, aby ste museli zdvíhať celé chodítko.


Ak chcete použiť chodítko ako chodítko na kroky,

Zamykacie západky nechajte v úložných otvoroch a jednoducho ho rozložte. Ak chcete použiť chodítko ako pevné, vložte obe zámkové západky do zámkových otvorov. Pred každým použitím sa vždy uistite, že všetky bezpečnostné prvky sú správne zabezpečené. Na zloženie chodítka najprv odomknite obe západky (vložte ich do úložných otvorov) a stlačte zámok skladacieho mechanizmu. Teraz môžete chodítko zložiť na veľkosť transportu.

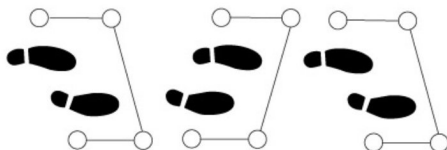

Prechod z invalidného vozíka na chodítko

Uistite sa, že chodítko je stabilné. Oprite si ruky o rukoväť vozíka, postavte sa a postupne a opatrne, rukou po ruke, sa presuňte k chodítku.

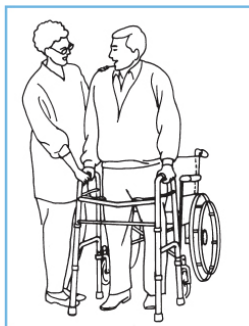

Chôdza s chodítkom

1. Umiestnite stred chodidla medzi zadné nohy chodítko.
2. Zdvihnite chodítko a pohodlne ho posuňte o niečo ďalej od seba. Uistite sa, že teraz pevne spočíva na zemi.
3. Opatrne, krok za krokom, priblížte sa k chodcovi.



1.




2. 3.



Prechod z invalidného vozíka na chodítko – (ak máte zranenú pravú dolnú končatinu)

Uistite sa, že chodítko je stabilné. Oprite si ruky o rukoväť vozíka, postavte sa a postupne a opatrne najprv presuňte ľavú ruku a potom pravú ruku k chodítku. (Ak máte zranenú ľavú nohu alebo chodidlo, najprv pohnite pravou rukou a potom ľavou).

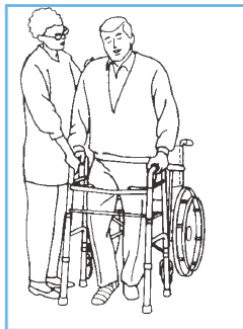


Individuálne nastavenia chodcov

S rukou natiiahnutou nadol by mala byť rukoväť chodítka vo výške zápästia. Ak položíte ruku na rukoväť, lakeť by mal byť ohnutý pod uhlom približne 20° - 30°. Nastavte optimálnu výšku chodítka na jednu z ôsmich polôh. Nastavte všetky 4 nohy do rovnakej polohy a skontrolujte ich uzamykanie (všetky západky musia cvaknúť).

Upozornenie:

Dávajte pozor na nasledujúce prekážky:

1. Predlžovacie káble
2. Tekutiny na podlahe
3. Bežci
4. Hračky alebo neporiadok
5. Nábytok
6. Dvere a prahy
7. Medzery v podlahe

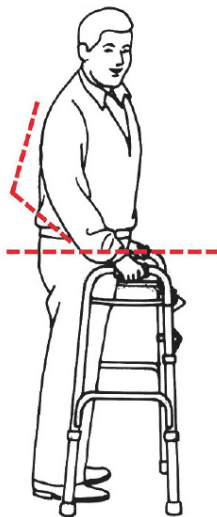

Upozornenie:

1. Netlačte dopredu len jednu stranu chodítka bez toho, aby ste ho najprv zdvihli.
2. Používajte iba originálne doplnky.
3. Používanie iných doplnkov vás vystavuje riziku pádu a zranenia.
4. Nepoužívajte chodítka na schodoch alebo eskalátoroch.
5. Nepreťažujte chodítka (záťaž maximálne 100 kg).

ZÁRUKA

Táto záruka nekryje chybu spôsobenú nesprávnym zaobchádzaním, nebanlivosťou alebo bežným opotrebovaním produktu. Záruka sa tiež nevzťahuje na komponenty, ktoré sú náchylné na opotrebenie v dôsledku povahy materiálu a vyžadujú pravidelnú výmenu, napríklad gumové diely, držiaky, kolesá a ich ukotvenia a diely.

Ochrana životného prostredia

Nevyhadzujte produkt s domácim odpadom po uplynutí jeho životnosti alebo v čase, keď by oprava bola neekonomická. Aby bolo možné produkt správne zlikvidovať, odovzdajte ho určeným zberným miestam, kde bude prijatý bezplatne. Správnym likvidovaním pomôžete šetriť cenné prírodné zdroje a predchádzať možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré môžu byť dôsledkom nesprávneho nakladania s odpadom. Pre viac informácií kontaktujte svoj miestny úrad alebo najbližšie zberné miesto. Ak je tento typ odpadu nesprávne likvidovaný v súlade s národnými predpismi, môžu byť uložené sankcie.

Služba

Ak po zakúpení produktu nájdete nejakú chybu, kontaktujte prosím servisné oddelenie. Pri používaní produktu postupujte podľa pokynov uvedených v priloženom návode na použitie. Sťažnosti sa neberú do úvahy, ak ste produkt upravili alebo ste nedodržali pokyny uvedené v návode na použitie.

Ak máte akékoľvek otázky ohľadom vášho produktu alebo záruky, kontaktujte prosím naše servisné oddelenie.

Kontakt nájdete na www.tvproducts.cz

Dodávateľ si vyhradzuje právo vykonať akékoľvek zmeny v návode na použitie a nezodpovedá za možné tlačové chyby. Ilustrácia a opis sa môžu líšiť od reality v závislosti od modelu.